


# Aplikace MagHealy

## Průvodce

Aplikace magnetického pole

Informační materiál pro uživatele MagHealy

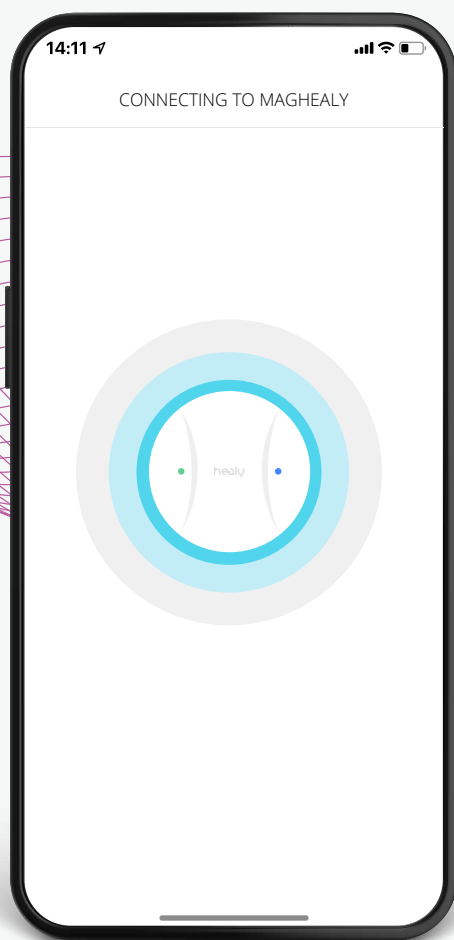

Frequencies for Your Life

[www.healy.world](http://www.healy.world)

# Aplikace MagHealy

## Průvodce



### **Poznámka:**

„Quantum Analyzed Frequencies“ („QAF“) je patentovaná technologie společnosti Healy World. Využívá data z fyzického generátoru šumu k přiřazení priority frekvencím, které mají podle profesionálních uživatelských zkušeností pro uživatele největší význam. Doba trvání, frekvence, intenzita, kmitočet, pojmenování a popis programů Quantum Analyzed Frequencies (QAF) jsou založeny na praktických zkušenostech odborníků a našem chápání interakce frekvenčně modulovaných magnetických polí s bioenergetickým polem. Nebyly potvrzeny nezávislými studiemi.

Programy MagHealy Quantum Analyzed Frequencies (QAF) jsou navrženy tak, aby podporovaly pohodu prostřednictvím harmonizace bioenergetického pole. Provedli jsme nezaujaté průzkumy před a po v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníků. Z těchto průzkumů vyplývá, že po aplikaci se účastníci cítili lépe. Přičítáme to harmonizaci bioenergetického pole, které označujeme jako tok energie života, tradičně nazývaný také čchi (nebo qi) a prána. Toto nebylo potvrzeno nezávislými studiemi.

Programy magnetického pole zařízení MagHealy nejsou lékařskými aplikacemi. Nejsou určeny k léčbě, ošetřování, zmírňování, diagnostice nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Pojmy použité v programech nepředstavují prohlášení o jejich účincích. Účelem programů je poskytnout uživateli nástroj pro zkoumání možností aplikace. Programy magnetického pole zařízení MagHealy nejsou lékařskými aplikacemi. Takovéto poradenství bys měl(a) vždy vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka. Pokud trpíš nebo máš podezření, že trpíš nějakým onemocněním, nebo pokud jsi v péči lékaře, měl(a) by ses před použitím zařízení MagHealy poradit se svým lékařem. Vždy používej zařízení MagHealy podle návodu k použití.

### **Odmítnutí odpovědnosti:**

Věda neuznává existenci informačního pole, jeho analýzu, harmonizaci a další význam z důvodu nedostatku vědeckých důkazů.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) zařízení Healy, Quantum Potential Frequencies (QPF) zařízení Healy Coil a programy magnetického pole zařízení MagHealy nejsou konvenční medicínou uznávány z důvodu nedostatku vědeckých důkazů ve smyslu konvenční medicíny.

Informace uvedené na těchto stránkách slouží pouze pro referenční a vzdělávací účely. Ačkoli se Healy World snaží udržovat informace obsažené na těchto stránkách aktuální, nezaručuje ani negarantuje přesnost, vhodnost či aktuálnost uvedených informací. Healy World nenes odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody plynoucí z využití informací uvedených na těchto stránkách. Veškeré informace jsou prezentovány „tak, jak jsou“ a odpovědnost za jejich interpretaci a uplatnění nese výhradně uživatel. Používání produktů, programů nebo informací společnosti Healy World je na vlastní riziko uživatele a podléhá jeho uvážení a nezávislému úsudku. Společnost Healy World se výslovně zříká odpovědnosti za rozhodnutí uživatele související s používáním produktů nebo služeb společnosti Healy World, která jsou mimo rozsah návodu k použití a příručky poskytnuté společností.

© 2023 Healy International B.V.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce v jakékoli formě, včetně elektronické, a publikace, včetně na internetu, v digitálních aplikacích a/nebo na platformách sociálních médií, je zakázána, pokud k tomu společnost Healy International B.V. nedala předchozí písemný souhlas.

Healy International B.V. | Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Nizozemsko


# Předmluva

Tento dokument tě provede aplikacemi magnetického pole v aplikaci Healy, které můžeš používat u svého zařízení MagHealy, abys mohl(a) rozvíjet důležité oblasti pohody jak v tělesné, tak v citové oblasti. Dokument vysvětluje základy aplikace magnetického pole a představuje jednotlivé programy v různých aplikacích MagHealy.



Také si prosím přečti online návod k použití tvého zařízení MagHealy. Obsahuje důležitá bezpečnostní upozornění i pokyny pro správný provoz, čištění a skladování tvého zařízení MagHealy.

**Doufáme, že se ti MagHealy bude líbit a přinese ti lepší pohodu!**

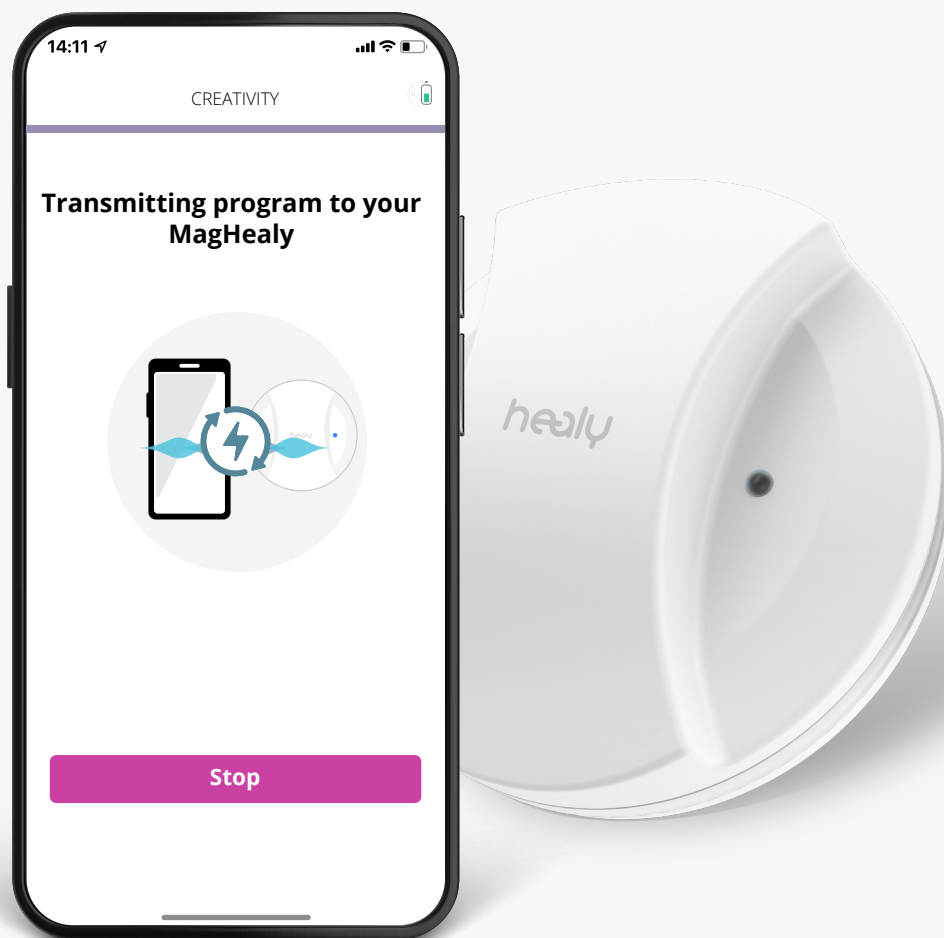



# Obsah

<b>Předmluva</b> .....	<b>3</b>
<b>Obsah</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Aplikace MagHealy</b> .....	<b>5</b>
1.1 Aplikace MagHealy Classic	5
1.2 Aplikace MagHealy Water	6
1.3 Aplikace MagHealy Atmosphere	8
1.4 Aplikace MagHealy McMakin	10
1.5 Aplikace MagHealy Meridian	12
<b>2. Další funkce aplikace</b> .....	<b>13</b>
2.1 Informační centrum	13
2.2 Nastavení	13
2.3 Expertní oblast	14

# 1. Aplikace MagHealy

Na následujících stránkách najdeš všechny aplikace MagHealy, které využívají účinků magnetických polí a kvantové analyzované frekvence (QAF)<sup>1</sup>.

## 1.1 Aplikace MagHealy Classic

Programy MagHealy Classic zajišťují účinky aplikace magnetického pole. Jsou vylepšeny technologií Healy a využívají kvantové analyzované frekvence (QAF), které jsou určeny patentovaným procesem zpětné biologické vazby Healy nedávno patentovaným v Evropě (číslo patentu EU: 3638360).



Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
1	Harmonie buněk	QAF	36 min	1× denně	70–100 %
2	Regenerace	QAF	36 min	1× denně	70–100 %
3	Vitalita	QAF	36 min	1× denně	5–15 %
4	Harmonie hlavy	QAF	36 min	1× denně	5–15 %
5	Klouby	QAF	36 min	1× denně	20–50 %
6	Únava	QAF	36 min	1× denně	20–50 %
7	Spánek	QAF	36 min	1× denně	70–100 %
8	Rovnováha těla	QAF	36 min	1× denně	50–70 %
9	Energetický oběh	QAF	36 min	1× denně	70–100 %
10	Dobrá nálada	QAF	36 min	1× denně	5–15 %
11	Země	QAF	36 min	1× denně	20–50 %
12	Sféry	QAF	30 min	1× denně	70–100 %
13	Tlak	QAF	36 min	1× denně	5–15 %
14	Zvuky ticha	QAF	39 min	1× denně	5–15 %

Název programu	Popis
Harmonie buněk	Harmonizace bioenergetického pole buněk rezonančními frekvencemi.
Regenerace	Regenerace bioenergetického pole těla, duše a mysli.
Vitalita	Obnovení vitality bioenergetického pole.
Harmonie hlavy	Harmonizace bioenergetického pole hlavy.
Klouby	Harmonizace bioenergetického pole kloubů.
Únava	Aktivizace bioenergetického pole v případě únavy.
Spánek	Harmonizace bioenergetického pole při spánku.
Rovnováha těla	Harmonizace bioenergetického pole celé bytosti.
Energetický oběh	Harmonizace cirkulace bioenergetických energií.
Dobrá nálada	Frekvence k harmonizaci nálady, když hledáš duševní rovnováhu

1) „Quantum Analyzed Frequencies“ („QAF“) je patentovaná technologie společnosti Healy World. Využívá data ze zdroje fyzického ruchu k přiřazení priority frekvencím, které mají podle naší zkušenosti pro uživatele největší význam.

Název programu	Popis
Země	Propoj se s frekvencemi Matky Země
Sféry	Zharmonizuj se s frekvencemi zemské atmosféry
Tlak	Osvoboď se od vnějšího a vnitřního tlaku
Zvuky ticha	Nejvhodnější pro lidi se sluchovou disharmonií

## 1.2 Aplikace MagHealy Water

Aplikace MagHealy Water obsahuje různé programy pro úpravu pitné vody magnetickými poli QAF (kvantová analyzovaná frekvence) vyzařovanými zařízeními MagHealy, takže lidské bytosti mohou přijímat energii a informace (pomáhá i zvířatům nebo rostlinám).

Vodu chápeme jako hmotnou formu informačního pole, která se skládá z molekul, které jsou elektrickými dipóly a obsahují všechny informace, na kterých je založen život. Podle našeho chápání má velice specifické frekvenční spektrum, které především umožňuje rozvíjet život na naší planetě!



Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
1	Fitness	QAF	10 min	1× denně	100 %
2	Harmonie buněk	QAF	10 min	1× denně	100 %
3	Transport živin	QAF	10 min	1× denně	100 %
4	Harmonie ledvin	QAF	10 min	1× denně	100 %
5	Harmonie bloudivého nervu (vagus)	QAF	10 min	1× denně	100 %
6	Harmonie pokožky	QAF	10 min	1× denně	100 %
7	Místní energetický oběh	QAF	10 min	1× denně	100 %
8	Systémový energetický oběh	QAF	10 min	1× denně	100 %
9	Bioenergetická regenerace	QAF	10 min	1× denně	100 %
10	Ranní půst	QAF	10 min	1× denně	100 %
11	Polední půst	QAF	10 min	1× denně	100 %
12	Večerní půst	QAF	10 min	1× denně	100 %
13	Energie	QAF	10 min	1× denně	100 %
14	Duševní jasnost	QAF	10 min	1× denně	100 %
15	Otevření srdce	QAF	10 min	1× denně	100 %
16	Koherence vody	QAF	10 min	1× denně	100 %
17	Očista od negativních informací	QAF	10 min	1× denně	100 %
18	Bioenergetický detox	QAF	10 min	1× denně	100 %
19	Před stresem	QAF	10 min	1× denně	100 %
20	Po stresu	QAF	10 min	1× denně	100 %
21	Bioenergetická obrana	QAF	10 min	1× denně	100 %
22	Nepříjemné pocity	QAF	10 min	1× denně	100 %



Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
23	Spánek	QAF	10 min	1× denně	100 %
24	Rostliny	QAF	10 min	1× denně	100 %

Název programu	Popis
Fitness	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole svalů.
Harmonie buněk	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole buněk.
Transport živin	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole k optimálnímu prostředí pro transport živin.
Harmonie ledvin	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole pro regulaci vody.
Harmonie bloudivého nervu (vagus)	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci přirozené koherence vody.
Harmonie pokožky	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole pokožky pro optimalizovanou hydrataci a distribuci vody. Projev svoji vnitřní krásu i navenek díky zlepšené hydrataci.
Místní energetický oběh	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci místního energetického oběhu bioenergetického pole.
Systémový energetický oběh	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci celého energetického oběhu bioenergetického pole.
Bioenergetická regenerace	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci obnovení rovnováhy a regeneraci bioenergetického pole.
Ranní půst	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole při ranním půstu.
Polední půst	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole při poledním půstu.
Večerní půst	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole při večerním půstu.
Energie	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole mitochondrie.
Duševní jasnost	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole pro optimalizovanou jasnost.
Otevření srdce	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole pro otevřenost vůči sociálním vztahům.
Koherence vody	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci přirozené koherence vody.
Očista od negativních informací	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci a vyčištění její informace.
Bioenergetický detox	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k podpoře čištění bioenergetického pole.
Před stresem	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci a přípravě bioenergetického pole před psychologickým stresem.
Po stresu	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci a vyrovnaní bioenergetického pole po stresujících událostech.
Bioenergetická obrana	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci a posílení bioenergetického pole.

Název programu	Popis
Nepříjemné pocity	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci pocitů v bioenergetickém poli a vyrovnání nálady.
Spánek	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole pro klidný spánek. Ideální doba je před šestou hodinou večerní.
Rostliny	Úprava koherentní kvantové strukturované vody k harmonizaci bioenergetického pole rostlin pro zlepšenou distribuci a přepravu vody.

### 1.3 Aplikace MagHealy Atmosphere

Programy MagHealy Atmosphere vytvářejí pulzující magnetické pole, které se v místnosti rozprostírá do vzdálenosti až jednoho a půl metru (nebo pět stop). Programy aplikace Atmosphere působí prostřednictvím atmosféry, prostřednictvím prostoru.

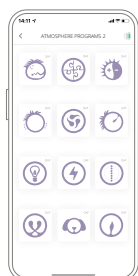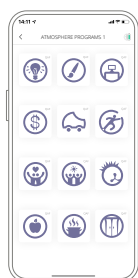

Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
1	Studium	QAF	∞	1× denně	30–100 %
2	Kreativita	QAF	∞	1× denně	30–100 %
3	Práce	QAF	∞	1× denně	30–100 %
4	Prosperita	QAF	∞	1× denně	30–100 %
5	Auto	QAF	∞	1× denně	30–100 %
6	Cvičení	QAF	∞	1× denně	30–100 %
7	Rodinná harmonie	QAF	∞	1× denně	30–100 %
8	Dětské hraní	QAF	∞	1× denně	30–100 %
9	Stravování	QAF	∞	1× denně	30–100 %
10	Očista potravin	QAF	∞	1× denně	30–100 %
11	Kuchyň	QAF	∞	1× denně	30–100 %
12	Spíž	QAF	∞	1× denně	30–100 %
13	Stres	QAF	∞	1× denně	30–100 %
14	Koherence	QAF	∞	1× denně	30–100 %
15	Energie	QAF	∞	1× denně	30–100 %
16	Relaxace	QAF	∞	1× denně	30–100 %
17	Holistické zdraví	QAF	∞	1× denně	30–100 %
18	Spánek	QAF	∞	1× denně	30–100 %
19	Elektrocitlivost	QAF	∞	1× denně	30–100 %
20	Energetické čištění	QAF	∞	1× denně	30–100 %
21	Rovnováha čakr	QAF	∞	1× denně	30–100 %
22	Vztahy	QAF	∞	1× denně	30–100 %
23	Harmonie zvířat	QAF	∞	1× denně	30–100 %
24	Rostliny	QAF	∞	1× denně	30–100 %



Název programu	Popis
Studium	Navržen k vytvoření energetického prostoru, který podporuje koncentraci a učení se.
Kreativita	Podporuje správné prostředí pro kreativní myšlenky a nápady harmonizováním energetického pole.
Práce	Navržen k vytvoření optimálního prostředí na vašem pracovišti, které zlepšuje výkon, týmovou práci a soustředění.
Prosperita	Energetické zlepšení prostoru pro vytvoření správného prostředí pro finanční a profesní aktivity.
Auto	Optimalizace energetického pole uvnitř automobilu při řízení.
Cvičení	Harmonizace okolního prostoru pro vytvoření energetického pole pro vaše cvičení.
Rodinná harmonie	Harmonizace obytného prostoru pro podporu energetického prostředí pro celou rodinu.
Dětské hraní	Harmonizace okolního prostoru dětí pro optimalizaci jejich energetické pohody při hraní.
Stravování	Vytváření pozitivního energetického pole pro stravování.
Očista potravin	Harmonizace energetické paměti bioenergetického pole potravin.
Kuchyně	Vytváření optimální atmosféry pro podporu pozitivního myšlení a emocionálního stavu pro přípravu potravin s vysokou energií.
Spíž	Harmonizace prostoru okolo potravin pro vytváření pozitivního prostředí pro skladování.
Stres	Harmonizace vnitřních očekávání a vnější reality pomocí energetické rovnováhy okolního prostoru.
Koherence	Podpora smyslu holistické pohody energetickou koherencí v okolním prostoru.
Energie	Vytváření prostoru plného energie energetickou harmonizací okolního prostoru.
Relaxace	Energetická harmonizace prostoru pro lepší zvládnání každodenního výkonu při provádění tebou zvolené relaxační metody.
Holistické zdraví	Zlepšuje pocit jednoty a soudržnosti těla, mysli a duše, podporuje celkovou tělesnou pohodu a vitalitu.
Spánek	Při umístění do prostoru, kde spíš, harmonizuje jin a jang pro zlepšení rovnováhy při spánku.
Elektrocitlivost	Energetická harmonizace prostoru pro vyrovnání elektromagnetických poruch.
Energetické čištění	Harmonizace energetické paměti prostoru pro vyrovnání negativních frekvencí.
Rovnováha čaker	Harmonizace prostoru pro vyrovnání celého systému čaker vašeho energetického těla zejména při meditaci.
Vztahy	Pečlivé vyrovnání okolního prostoru k energetické podpoře láskyplných vztahů.
Harmonie zvířat	Optimalizace prostoru pro podporu a pozitivní energetické pole pro rovnováhu zvířat.
Rostliny	Vyrovnání prostoru pro posílení pozitivního energetického růstu prostředí.

Na základě našich nezaujatých průzkumů pohody před/po v kontextu randomizované kontrolované studie uživatelů MagHealy/Healy, které ukázaly, že se po použití uživatelé cítili lépe, jsme došli k závěru, že používání zařízení MagHealy může podporovat tvoji harmonickou pracovní atmosféru a také může pozitivně ovlivňovat tvůj rodinný život. Zkušenosti našich uživatelů naznačují, že aplikace Atmosphere mohou podporovat jasnost a porozumění, kreativitu a soustředění všech lidí v místnosti.

Zařízení MagHealy je navrženo pro rozšíření schopností a možností technologie Healy: originální zařízení Healy, přiléhající k tělu, vysílá frekvence přímo do těla, zatímco MagHealy působí prostorově vysíláním magnetických polí, modulovaných kvantovými analyzovanými frekvencemi (QAF).

## 1.4 Aplikace MagHealy McMakin

Dvojí použití tří vrstev magnetických polí pro vytvoření interference dvou rozdílných souběžných frekvencí je to, čemu říkáme aplikace MagHealy McMakin, pojmenované po paní Carolyn McMakin D.C., americké učitelce, výzkumnici a průkopnici aplikací interferujících duální frekvence.

Programy MagHealy McMakin využívají specifických frekvenčních párů, zacílených na harmonizaci bioenergetického pole. V každém frekvenčním páru se první frekvence týká typu nevyváženosti, zatímco druhá frekvence definuje cílovou lokaci v bioenergetickém poli, např. v bioenergetickém poli jater. Každý ze 24 programů McMakin obsahuje komplexní sekvenci těchto párů.



Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
1	Tělesné pohodlí	FSMF	63 min	1× denně	20–100 %
2	Harmonie pokožky	FSMF	39 min	1× denně	20–100 %
3	Harmonie prostaty	FSMF	44 min	1× denně	20–100 %
4	Měkká tkáň	FSMF	63 min	1× denně	20–100 %
5	Měkká tkáň týd. 1–4	FSMF	49 min	1× denně	20–100 %
6	Po cvičení	FSMF	30 min	1× denně	20–100 %
7	Harmonie krku	FSMF	43 min	1× denně	20–100 %
8	Kloub	FSMF	53 min	1× denně	20–100 %
9	Rovnováha kloubů	FSMF	76 min	1× denně	20–100 %
10	Harmonie šlach	FSMF	60 min	1× denně	20–100 %
11	Harmonie bederní oblasti	FSMF	48 min	1× denně	20–100 %
12	Harmonie chodidla	FSMF	43 min	1× denně	20–100 %
13	Spánek	FSMF	35 min	1× denně	20–100 %
14	Harmonie mozku	FSMF	29 min	1× denně	20–100 %
15	Harmonie nervů	FSMF	54 min	1× denně	20–100 %
16	Emoce	FSMF	30 min	1× denně	20–100 %
17	Harmonie thalamu	FSMF	56 min	1× denně	20–100 %
18	Harmonie bloudivého nervu (vagus)	FSMF	43 min	1× denně	20–100 %
19	Detox	FSMF	37 min	1× denně	20–100 %
20	Harmonie ledvin	FSMF	92 min	1× denně	20–100 %
21	Harmonie trávení	FSMF	59 min	1× denně	20–100 %
22	Ženská péče	FSMF	29 min	1× denně	20–100 %
23	Harmonie vaječníků	FSMF	35 min	1× denně	20–100 %
24	Harmonie dutin	FSMF	38 min	1× denně	20–100 %

FSMF = Frekvenčně specifické magnetické pole

Název programu	Popis
Tělesné pohodlí	Harmonizace bioenergetického pole míchy.
Harmonie pokožky	Harmonizace bioenergetického pole pokožky pro energetickou regeneraci.
Harmonie prostaty	Harmonizace bioenergetického pole prostaty.
Měkká tkáň	Harmonizace bioenergetického pole měkké tkáně pro regeneraci.
Měkká tkáň týd. 1–4	Harmonizace bioenergetického pole měkké tkáně pro regeneraci. Doporučeno v týdnu 1–4 po bioenergetické události.
Po cvičení	Harmonizace bioenergetického pole svalů. Doporučeno do 20 minut po cvičení.
Harmonie krku	Harmonizace bioenergetického pole muskuloskeletálního systému.
Kloub	Harmonizace bioenergetického pole muskuloskeletálního systému.
Rovnováha kloubů	Harmonizace bioenergetického pole kloubu pro regeneraci.
Harmonie šlach	Harmonizace bioenergetického pole šlach pro regeneraci.
Harmonie bederní oblasti	Harmonizace bioenergetického pole muskuloskeletálního systému.
Harmonie chodidla	Harmonizace bioenergetického pole měkké tkáně.
Spánek	Harmonizace negativních vlivů ovlivňujících kvalitu spánku.
Harmonie mozku	K harmonizaci vědomí, posílení smyslu koherence a harmonizaci bioenergetických traumat.
Harmonie nervů	Harmonizace bioenergetického pole pro zklidnění.
Emoce	Harmonizace bioenergetického pole pro rovnováhu emocí v případě stresu.
Harmonie thalamu	Harmonizace bioenergetického pole thalamu pro vyrovnání senzibilizace.
Harmonie bloudivého nervu (vagus)	Harmonizace bioenergetického pole pro podporu energetické relaxace a regenerace.
Detox	Harmonizace bioenergetického pole jater.
Harmonie ledvin	Harmonizace bioenergetického pole ledvin.
Harmonie trávení	Energetická harmonizace metabolické činnosti bioenergetického pole trávicí soustavy.
Ženská péče	Harmonizace bioenergetického pole pro ženy.
Harmonie vaječníků	Harmonizace energetických interferencí v bioenergetickém poli vaječníků.
Harmonie dutin	Harmonizace bioenergetického pole dutin pro vyrovnání energetických poruch.

## 1.5 Aplikace MagHealy Meridian

Podle tradiční čínské medicíny je životní energie (čchi) vedena drahami, tzv. meridiány. Podle této koncepce existuje dvanáct hlavních kanálů a každý meridián je přiřazen k funkčnímu okruhu (orgánovému systému). Příslušné akupunkturální body jsou tedy na meridiánech „navlečeny jako korálky“. Kromě toho akupunkturální body jsou vázány na orgány nebo jejich částí, které se aktivují stimulací s cílem pozitivně ovlivnit hojení či léčení daného orgánu.

Programy MagHealy QAF jsou navrženy podle tradičního čínského meridiánového systému pro harmonizaci bioenergetického pole jednotlivých meridiánů.




Obj. č.	Název programu	Technologie	Doba trvání	Frekvence	Intenzita
1	Perikard	QAF	41 min	1× denně	100 %
2	Harmonie ledvin	QAF	41 min	1× denně	100 %
3	Slezina-pankreas	QAF	41 min	1× denně	100 %
4	Žaludek	QAF	41 min	1× denně	100 %
5	Plíce	QAF	41 min	1× denně	100 %
6	Harmonie jater	QAF	41 min	1× denně	100 %
7	Srdce	QAF	41 min	1× denně	100 %
8	Žlučník	QAF	41 min	1× denně	100 %
9	Tenké střevo	QAF	41 min	1× denně	100 %
10	Triple heater	QAF	41 min	1× denně	100 %
11	Tlusté střevo	QAF	41 min	1× denně	100 %
12	Močový měchýř	QAF	41 min	1× denně	100 %

Název programu	Popis
Perikard	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu perikardu.
Ledviny	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu ledvin.
Slezina-pankreas	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu sleziny a slinivky břišní.
Žaludek	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu žaludku.
Plíce	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu plic.
Játra	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu jater.
Srdce	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu srdce.
Žlučník	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu žlučníku.
Tenké střevo	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu tenkého střeva.
Trojitý ohříváč	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu trojitého ohříváče.
Tlusté střevo	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu tlustého střeva.
Močový měchýř	Harmonizace bioenergetického pole meridiánu močového měchýře.

## 2. Další funkce aplikace

### 2.1 Informační centrum



Nabídka Informační centrum obsahuje všechny důležité informace o tvém zařízení MagHealy a nabízí další možnosti podpory.

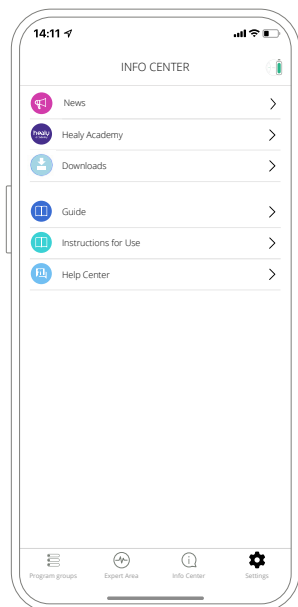

### 2.2 Nastavení


V nabídce Nastavení najdeš všechny informace o aplikaci a zařízení MagHealy a můžeš zde přizpůsobit konfiguraci aplikace.

Po kliknutí na „My MagHealy“ můžeš aktualizovat firmware zařízení, aktualizovat konfiguraci programů a připojit se k jinému zařízení.

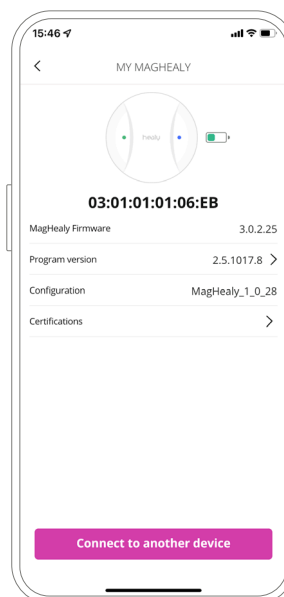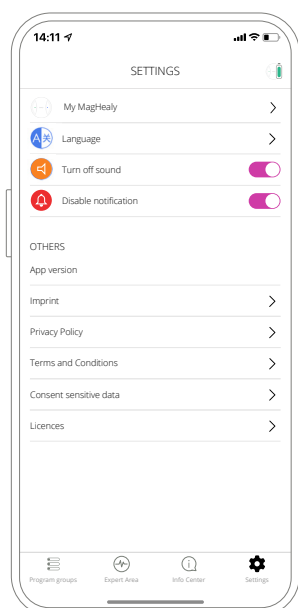

## 2.3 Expertní oblast

V Expertní oblasti můžeš pro svou aplikaci v cloudu HealAdvisor vygenerovat jedinečný TAN a sdílet jej s odborným uživatelem. Pomocí expert TAN může odborník přenášet jednotlivé programy ze svého profesionálního systému na tvoji stránku Expertní programy nebo mazat již přenesené programy.

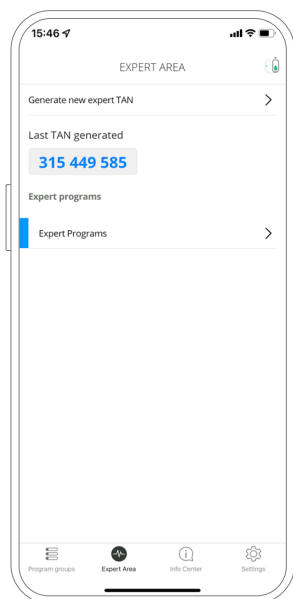



Frequencies for Your Life

Vydáno pro:

Healy International B.V.

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Holandsko

[www.healy.world](http://www.healy.world)